

Conforme a las
ERC / AHA 2015
Directrices
sobre RCP*




RCP efectiva Ahora en sus manos

Presentación del dispositivo de información para RCP Intellisense™

En una emergencia cardíaca, realizar una RCP efectiva es crucial y, a menudo, los reanimadores se preguntan: «¿Estoy haciendo la RCP correctamente?» Con el dispositivo de información para RCP Intellisense, realizar compresiones de RCP efectivas ahora está al alcance de sus manos.

Gracias a su diseño compacto, el dispositivo de información para RCP Intellisense puede utilizarse en pacientes de todos los tamaños. La tecnología con sensor de movimiento proporciona al reanimador indicaciones de voz inmediatas si la velocidad y profundidad de la RCP están fuera de los parámetros aceptables de 2015 de la ERC o el AHA.* La herramienta inteligente y de fácil utilización para RCP trabaja conjuntamente con su desfibrilador externo automatizado Powerheart® G5 para ofrecer una terapia con desfibrilador y la posibilidad de salvar vidas con la RCP.

Descubra hoy por qué una RCP efectiva ahora es más fácil.

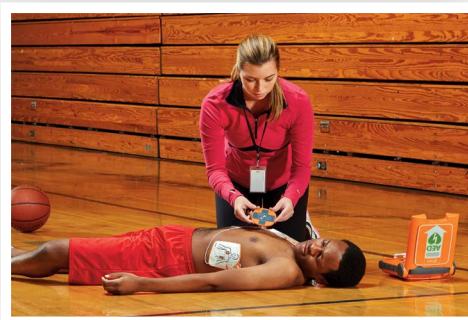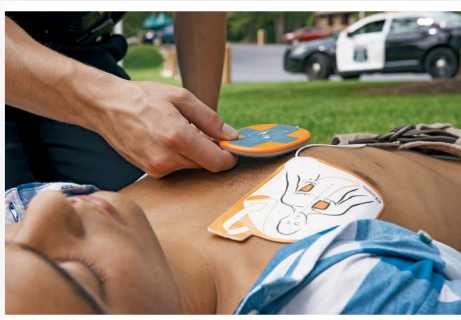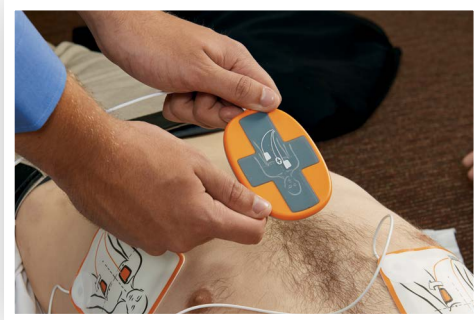

Tecnología inteligente, RCP efectiva

- El dispositivo de información para RCP cuenta con la tecnología Rescue Ready®, un circuito inteligente integrado y un sensor de movimiento para autoverificaciones de presencia y funcionalidad.
- Con un toque, las indicaciones de voz y texto del dispositivo de información para RCP cambian de idioma.
- El rendimiento de RCP del reanimador puede registrarse en el informe de reanimación.
- Los datos de verificación automática de Rescue Ready se registran en el Administrador de DEA.

Fácil de preparar y de usar

- Ahora, tanto las personas experimentadas en DEA como aquellas que lo utilizan por primera vez, pueden efectuar una RCP efectiva basada en las directrices de 2015 del ERC y la AHA.
- Su sencillo funcionamiento solo requiere colocarlo y pulsarlo, sin necesidad de ninguna preparación complicada, ajuste o retraso.
- Su superficie antideslizante y su forma ergonómica garantizan una colocación estable durante la RCP.
- Las indicaciones de voz y texto proporcionan instrucciones correctivas sobre la velocidad y profundidad de las compresiones para ayudar a garantizar una RCP efectiva.
- Y si un reanimador no desea utilizar el dispositivo de información para RCP, puede dejarlo a un lado sin que interfiera en la reanimación.

«Ejerza más presión y suelte completamente»

- La información de voz y texto indica cuando la profundidad de compresión necesita ser corregida: «Ejerza más presión y suelte completamente» si las compresiones son demasiado superficiales con énfasis en la reexpansión, «ejerza menos presión» si las compresiones son demasiado fuertes. El dispositivo de información para RCP también proporciona una corrección del ritmo de compresión: «presione más rápido» o «presione más despacio». Todas las cuatro indicaciones están diseñadas para mantener a los reanimadores dentro de los parámetros de las directrices del ERC/AHA.
- Con el dispositivo de información para RCP, el Powerheart G5 es el primer DEA que ofrece indicaciones correctivas en dos idiomas sobre la velocidad y profundidad de las compresiones torácicas conforme a las directrices de 2015 sobre RCP del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y la American Heart Association (AHA).*

*Basado en las directrices de 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y la American Heart Association (AHA) para reanimación cardiopulmonar (RCP) y la atención cardiovascular de urgencia, publicadas el 15 de octubre de 2015.

**Para su uso en pacientes con parada cardíaca de ocho años de edad o más, o con un peso superior a los 25 kg (55 lbs).

Cardiac Science Corporation - N7 W22025 Johnson Drive, Suite 100, Waukesha, WI 53186
Pedidos y Atención al Cliente - +39.0523.1901052 • Fax: +39.0523.1885099 • iberia@cardiacscience.it
Servicio técnico - iberia@cardiacscience.it

¡Visite www.cardiacscience.es/CPR para ver en acción nuestro dispositivo de información para RCP!

